

#### 1.- Presentación del producto.

El sistema de drenaje de lavado pulsátil es usado para el debridamiento de heridas. Combina la conveniencia y la potencia para obtener un flujo lineal y eficiente de irrigación pulsátil y debridamiento. Su principal utilización clínica es el servicio de ortopedia, puede ser usado para la cadera y el reemplazo de rodilla, principalmente.

Este paquete incluye una boquilla grande de alta capacidad y otra boquilla estrecha también de alta capacidad de debridamiento.

Este sistema esta diseñado para un único uso.

#### 2.- Imagen de la estructura principal y cuadro eléctrico

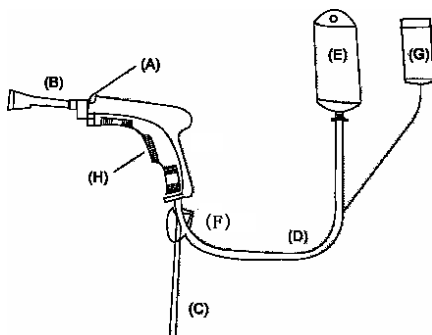


Imagen 1: estructura principal

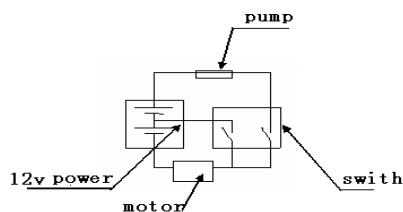


Imagen 2: cuadro eléctrico

#### 3.- Información importante para el usuario

##### 3.1 Símbolos

Los símbolos siguientes son utilizados en este manual de instrucciones y en el mismo producto.

Símbolo	Descripción
WARNING!	Indica una situación, que si no sigue las instrucciones exactamente puede causar daño al paciente o al usuario. No proceda hasta que todas las instrucciones estén entendidas claramente y se cumplan el resto de condiciones.
CAUTION!	Indica una situación, que si no sigue las instrucciones exactamente puede causar daño al aparato o equipamiento. No proceda hasta que todas las instrucciones estén entendidas claramente y se cumplan el resto de condiciones.
NOTE!	Indica una información importante para obtener un uso óptimo del producto.
	Para un solo uso.
	Atención! Por favor, consulte los documentos adjuntos.
	tipo BF parte aplicada
	FABRICANTE
	Esterilizado EO

##### 3.2 Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el sistema y tenga en cuenta las siguientes:

##### ADVERTENCIAS GENERALES!

- Estéril únicamente si el embalaje no ha estado abierto o dañado.
- Riesgo de explosión.
- No usar en presencia de gases inflamables.
- No sumergir en líquidos, puede disminuir el rendimiento de la bomba o alterar el PH del líquido.

#### ATENCIÓN!

Este aparato solo puede ser vendido, bajo pedido del médico.

##### Notas:

- 1: Fungible
- 2: Almacenar en un lugar fresco y seco
- 3: Contiene: 1 aparato
- 4: Si el sistema ha estado en el almacén más de 1 año, se recomienda verificar la bacteria, antes de usar.

#### 4.- Funcionamiento (Observar imagen)

- 1: Retirar el aparato y el resto de artículos de la bolsa de plástico.
- 2: Retraer el anillo de cierre presionando por encima (A)
- 3: Adjuntar la boquilla de debridamiento para manejar la pistola, presionar hacia el interior (B) hasta que la conexión este segura.
- 4: Bloquear la boquilla: dejar de presionar el anillo de bloqueo (A)
- 5: Adjuntar el paquete de batería a un lugar conveniente (G)
- 6: Conectar la línea de irrigación a la fuente de irrigación ( D - E)
- 7: Conectar la línea de succión a la fuente (C)
- 8: Retirar el protector del gatillo de barra. Presione la cima del gatillo de barra (H) para obtener alta velocidad. Presione la parte baja del gatillo de barra para obtener baja velocidad del fluido. Centre el gatillo de barra para parar la succión de fluido.
- 9: Para limitar la succión, el dispositivo tiene una abrazadera sobre el ajuste de línea de succión a la pistola de mano (F)

#### 5.- Fungible

Elimine la Anaconda sellada y la jeringuilla sellada según protocolos del hospital..

#### 6.- Información técnica

Peso	210g
Baja velocidad fluido	600 ml/min
Alta velocidad fluido	1.000 ml/min
Tensión:	8x1.5v (batería)

Chapter	Revision	Issue Date	Page	Data File
13	001	10.09.2009	1 von 1	Instrucciones de uso Mahe-Pulse Lavage (Spanish)